

主題敘述：PULSENSE PS-100 透過智慧型手持裝置(Android)更新韌體操作方式

※ 在使用 PULSENSE 和您的智慧型手持裝置之前，請先執行以下操作更新：

- 1、請在您的智慧型手持裝置上更新 EPSON PULSENSE View 應用程式，新版本為 1.0.8。
- 2、更新您的 PULSENSE 專用韌體，新版本為 01.11。




更新前，建議先將 PULSENSE PS-100 的資料先上傳完畢。
要完成 PULSENSE 應用程式和韌體的更新，大約需要 10~15 分鐘。

◆ 如何檢查 APP 版本：


開啟 EPSON PULSENSE View 應用程式，輸入帳號與密碼，點選左上角 ，選擇「資訊」，點擊「關於」，即可看到目前 APP 版本。

◎ 如果不是最新版本，請至智慧型手持裝置的「Play 商店」更新，或者透過自動更新功能在 Android 設備上啟用，該應用程式會自動更新。

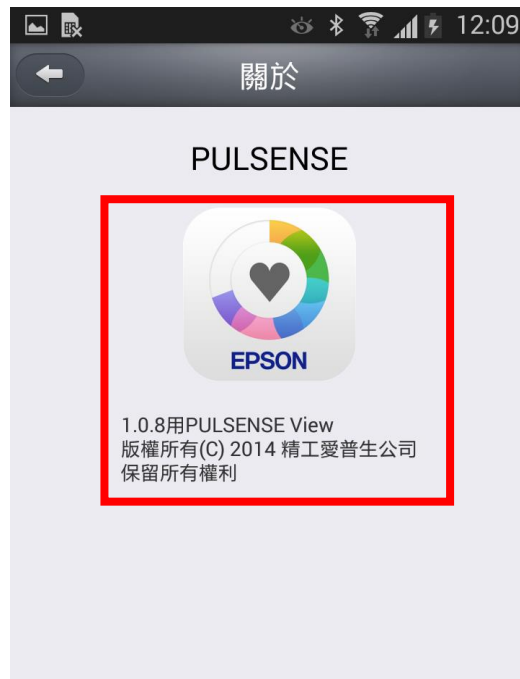

◆ 如何檢查 PULSENSE PS-100 韌體版本：

開啟 EPSON PULSENSE View 應用程式，輸入帳號與密碼，點選左上角 ，選擇「一般設定」，進入「設定設備」選單，固件信息下「版本」即可看到目前 PULSENSE PS-100 韌體版本，舊版為 01.01 或 01.10。(新版本為 01.11)

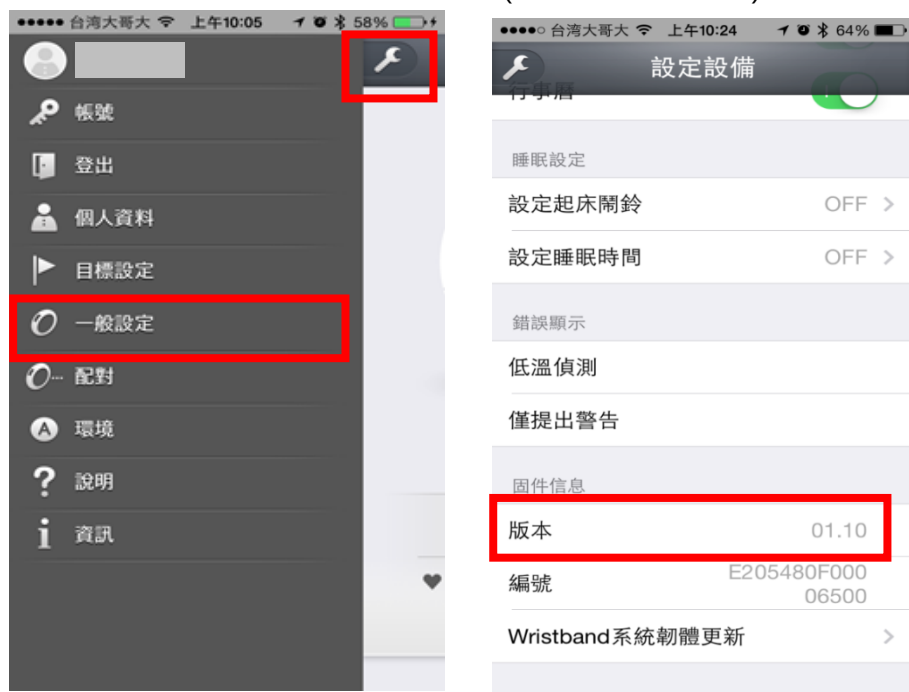

請準備以下事項，開始韌體更新：

- ★ PULSENSE PS-100 手環
- ★ 底座支架
- ★ AC 變壓器 (選購品) 或 USB 連接線 (透過它可對您的裝置進行充電)
- ★ 您的智慧型手持裝置
- ★ 韌體更新前，建議先將 PULSENSE PS-100 的資料先上傳完畢

步驟 1、檢查您的智慧型手持裝置 EPSON PULSENSE View 應用程式，版本為 1.0.8。

步驟 2、點選左上角  (在圖標的右上角顯示一個紅色的點，表示新版本可用)，選擇「一般設定」，進入「設定設備」選單，點選「Wristband 系統韌體更新」，出現有新版韌體 01.11，請將 PULSENSE PS-100 扣在底座上且接 USB 線或透過變壓器進行充電，按「開始」執行韌體更新。

※韌體的更新，大約需要 15 分鐘。


※智慧型手持裝置的網路 (3G / 4G / WIFI) 要保持暢通。

※更新過程中請不要卸除底座會導致更新失敗。


※若 PULSENSE PS-100 手環韌體不是 01.11 版則會顯示要更新版本訊息。



步驟 3、當韌體更新成功會出現以下畫面，需等到倒數 120 秒後才能進入另一個動作並且在倒數過程中手錶會出現「完成」。

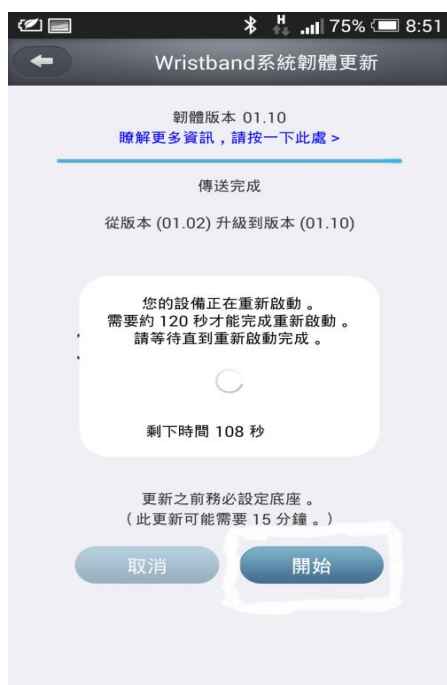

步驟 4、畫面出現需至智慧型手持裝置中「設定」-「藍芽」，選擇之前配對的 PULSENSE PS-500 做「解除配對」動作。

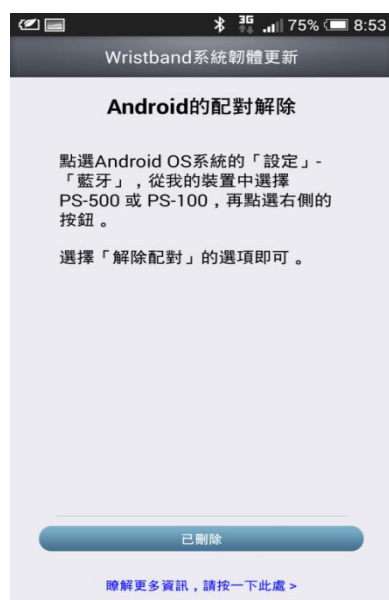

步驟 5、執行解除配對動作。



步驟 6、畫面會出現，請將智慧型手持裝置重新開機，重開機後請再重新配對。

